

Protokol 4 – Dag 2: Tilsætning af behandlingskemikalie

Materialer:

Materialer og udstyr	Leverandør og katalog nummer
Færdigblandet medie (Tabel A – Projekt fane)	
P1000, P100, P10 pipetter + spidser	In Vitro #IV-7032, #IV-7004, #IV-7003
Pipetboy + 5 ml, 10 ml og 25 ml stangpipetter	Greiner #GR-606180, #GR-607180, #GR-750180,
Behandlingskemikalie (Tabel A – Projekt fane)	
Centrifugerør, 15 ml og 50 ml	Hounisen #62554502, #62547254
Spildkop + affaldspose	


Forberedelse:

1. Tænd for LAF-bænken og desinficer overfladen med 70 % ethanol.
2. Desinficer alle genstande, før de placeres i LAF-bænken. Vær opmærksom på ikke at tørre tekst af, f.eks. på centrifugerør.
3. Forbered LAF-bænken med følgende genstande: pipetter, spidser, stativer, rør, pipetboy, affaldskop, affaldsspand med plastikpose, komplet vækstmedie og behandlingskemikalie.
4. Placer cellerne under det omvendte mikroskop ved hjælp af 4x- eller 10x-objektivet og estimer konfluensen. Tag evt. et billede af en af flaskerne.

Medbring beregningen du har forberedt hjemmefra (protokol 4, dag 1) til dag 2 og få den godkendt af en underviser før du fortsætter.


Fremgangsmåde for T25-flasker - cellevækst.

1. Bland behandlingskemikalie med mediet i et 50 ml rør. Husk at lave til en halv flaske ekstra for at have nok.
2. Sug mediet fra de flasker, som skal behandles, og tilsæt hurtigt, men forsigtigt medie med behandlingskemikalie til de 4 af flaskerne og notér ”behandling” på flaskerne.
3. Sug nu mediet fra de flasker, som ikke skal have behandling, de der kaldes for ”kontroller”.
4. Tilsæt frisk medie til kontrolflaskerne hurtigt, men forsigtigt, og notér kontrol på flaskerne.
5. Sæt flaskerne ”stacked” ind i inkubatoren ved 37 °C, 5% CO₂ til næste laboratoriegang.

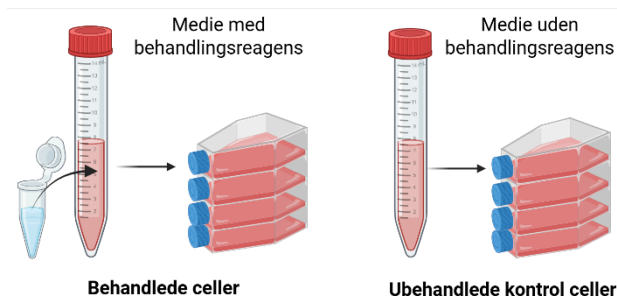


Fremgangsmåde for 6-brøndsplade – Genekspression

1. Bland medie med behandlingskemikalie (se Tabel A – projektspecifik fane for koncentration). Lav til 2 brønde og 1 ekstra. Husk på enhederne!
2. Sug medie fra alle brøndene.
3. Tilsæt færdigblandet medie med behandlingskemikalie til 2 af brøndene. Følg nedenstående pladesetup.
4. Tilsæt færdigblandet medie til de øvrige 2 brønde.
5. Sæt pladen ind i inkubatoren ved 37 °C og 5% CO₂.

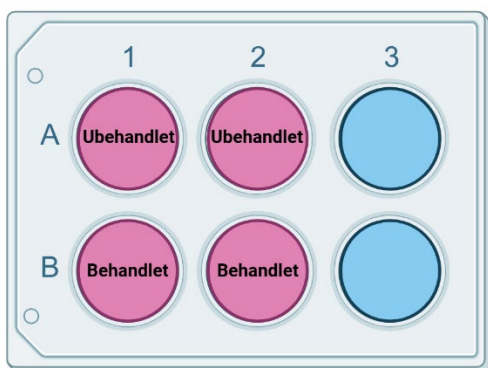

Fremgangsmåde for 24-brøndsplade – Protein udtryk

1. Bland medie med behandlingskemikalie (se Tabel A – projekt-specifik fane for koncentration) til 4 brønde og 1 ekstra. Husk på enhederne!
2. Sug medie fra alle brøndene.
3. Tilsæt færdigblandet medie til 4 af brøndene. Følg nedenstående pladesetup.
4. Tilsæt færdigblandet medie med behandlingskemikalie til de sidste 4 brønde.
5. Sæt pladen ind i inkubatoren ved 37 °C og 5% CO₂.
6. Ryd op i LAF-bænken.

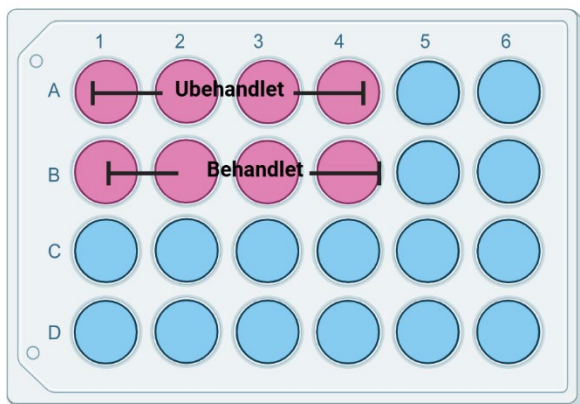

Note: Husk at gennemlæse relevante APV forud for næste laboratoriegang, så I kender jeres affaldsgrupper.